

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro

Качество, на которое
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru





Ваш надежный партнер

Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro – лучшее в своем классе. Они опираются на мощь инноваций и превосходный, отмеченный наградами дизайн. Как надежный партнер любой эффективной клиники, Intego и Intego Pro обладают всеми качествами, гарантирующими оптимальный рабочий процесс: эргономичным дизайном, превосходным лечебным процессом и отличным соотношением цены и качества. Благодаря всему этому Intego и Intego Pro являются эталоном высочайшего уровня надежности.

Отличное соотношение цены и качества

Высококачественное оборудование, инновационные технологии, индивидуальные опции по доступной цене.

Эргономичный дизайн

Интуитивное управление и оптимизированный интегрированный рабочий процесс.

Сделано в Германии

Постоянный контроль качества и долговечные материалы – это ваши надежные инвестиции в будущее.

Intego TS с нижней подачей инструментов

- Эргономичное расположение модуля врача благодаря широкому диапазону положений кронштейна.
- Гибкое позиционирование функционального съемного поддона.
- Интегрированная комплексная система гигиены для обеспечения оптимальных результатов.



Качество, на которое можно положиться

Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество требований к выбранной вами установке. Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro предлагает вам выбор из двух версий, каждую из которых вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – Intego или Intego Pro, верхнюю или нижнюю подачу инструментов – вы получите оптимальную эффективность по привлекательной цене.

Преимущества Intego Pro

- Интегрированная комплексная система гигиены для обеспечения оптимальных результатов.
- Сенсорный экран EasyTouch и интегрированная концепция управления ножной педалью для обеспечения простоты и интуитивной работы.
- Универсальный модуль ассистента, который подходит для лечения независимо от того, работаете вы один или с ассистентом.
- Многочисленные опции по привлекательной цене.
- Доступны модели TS с нижней подачей инструментов и CS с верхней подачей.

Преимущества Intego

- Компактный гидроблок для оптимального использования пространства.
- Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.
- Компактный модуль ассистента с широким углом вращения.
- Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.
- Доступны модели TS с нижней подачей инструментов и CS с верхней подачей.

CS – верхняя подача инструментов




Верхняя подача инструментов идеально подходит для любого вида лечения независимо от того, работаете вы с ассистентом или один.

Для удобства работы модуль врача поворачивается на 240°. Максимальное расстояние движения инструментов составляет 90 см.


Мир элегантности

Классические, неподвластные времени цвета для создания благородной, изысканной атмосферы.

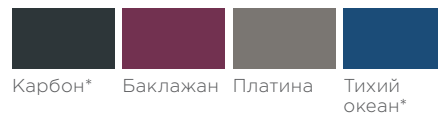

Мир природы

Нежные, теплые цвета для спокойной, расслабляющей атмосферы.

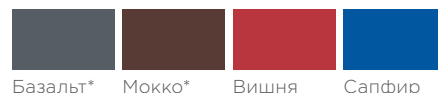

Мир жизнелюбия

Яркие, свежие цвета для живой и современной атмосферы.



* Цвета, доступные для мягкой обивки.

Эргономичный дизайн, на который можно положиться

Стоматологическая установка – это основа вашей клиники. Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro сочетает в себе прекрасный внешний вид и функциональность, что позволяет работать с комфортом и в оптимальных условиях. Наряду с гармоничным дизайном, тщательно подобранными компонентами и набором цветовых сочетаний, стоматологические установки Intego и Intego Pro отвечают жестким критериям нашей концепции эргономики. Intego и Intego Pro смогут соответствовать стилю вашей клиники и обязательно вам понравятся.

Варианты обивки



Обивка «Премиум»

Высококачественная бесшовная обивка обеспечивает комфорт пациента даже при длительном лечении.



Мягкая обивка

Мягкий, приятный на ощупь материал и комфортная набивка помогут пациентам максимально расслабиться, а профилированная поверхность – принять идеальное положение.

**Отмеченный
наградами дизайн**

Компания Dentsply Sirona завоевала многочисленные престижные награды за дизайн своих продуктов: Red Dot Design Award, iF Product Design Award Gold, iF Communication Design Award и Good Design Award.



Идеальные результаты

Любой процесс лечения – сложная процедура. Наши эргономичные установки обеспечивают оптимальный доступ к пациенту и плавный процесс лечения с высоким уровнем комфорта для пациента. Семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro использует все возможности эргономики, чтобы сделать процесс лечения легче. Достигайте совершенных результатов даже в конце рабочего дня, используя свои знания и нашу установку.



1

Удобное положение врача

- **Больше свободы движений**
Больше пространства для ног под креслом пациента за счет тонкой спинки. Свобода перемещения педали ножного управления.
- **Оптимизированный доступ к инструментам**
Отличная координация и гибкое позиционирование модулей врача и ассистента, независимое позиционирование поддона на установке с нижней или верхней подачей инструментов.
- **Удобные рабочие стулья**
Hugo, Carl, Paul.

2

Удобное позиционирование пациента

- **Легкая регулировка**
Гибкая настройка высоты кресла, поворотная плечевательница.
- **Высокий уровень комфорта пациента**
Система плавного подъема кресла, удобные подлокотники, опора для ног Vario, мягкая обивка, ErgoMotion.

3

Оптимальный обзор

- **Отличное освещение зоны препарирования**
Операционные светильники LEDview Plus и LEDlight, LED-подсветка инструментов.
- **Удобные регулируемые подголовники**
Плоский или двухшарнирный подголовник.
- **Прекрасные интраоральные снимки**
Камера SiroCam F, AF или AF+, HD-монитор 22" на установке.



4

Интегрированный рабочий процесс

- **Интуитивное управление**
Пользовательский интерфейс EasyPad или сенсорный экран EasyTouch.
- **Интегрированные функции**
Встроенное управление крутящим моментом при эндодонтическом лечении, управление апекслокатором с помощью EasyTouch.
- **Современное оборудование**
Инновационные инструменты, усовершенствованная система коммуникации с пациентом Sivision, USB-интерфейс, поддержка SD-карт и интерфейс Ethernet.

Отличные результаты

- Клинические
- Эстетические
- Экономические

- 1 Sprayvit E**
Оптимальный обзор благодаря светодиодной подсветке.
- 2 Мотор BL ISO E**
Стерилизуемый бесщеточный мотор с управлением скоростью и крутящим моментом. Невероятно легкий, компактный, с широким диапазоном скоростей.
- 3 Скейлер SiroSonic L**
Стерилизуемые наконечник и насадки. Контролируемая и направленная осцилляция. Электронное управление мощностью и подачей воды.
- 4 SiroCam F, AF или AF+**
Готовые к работе камеры для получения детализированных изображений. Исключительно просты в работе. Камера SIROCAM AF/AF+ с автофокусом.



Интуитивное управление

Сложные лечебные процедуры требуют полной концентрации. Именно поэтому семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro интуитивно и оборудовано современными интерфейсами и инновационными инструментами, делающими процесс лечения простым и понятным. Вы сможете сконцентрироваться только на том, что на самом деле важно – на вашем пациенте и на достижении безупречного результата.

Современные интуитивные интерфейсы



EasyPad

Понятный и интуитивный пользовательский интерфейс – стандарт для Intego и Intego Pro.



EasyTouch


Пользовательский интерфейс может быть дополнительно интегрирован в стоматологическую установку. Интуитивная сенсорная панель, больше опций, больше комфорта.

Возможности интеграции для эндодонтического лечения



Апекслокатор

Апекслокатор может быть встроен в EasyTouch, что позволит постоянно контролировать глубину обработки во время эндодонтического лечения и снизить дозу излучения при рентгеновской съемке.

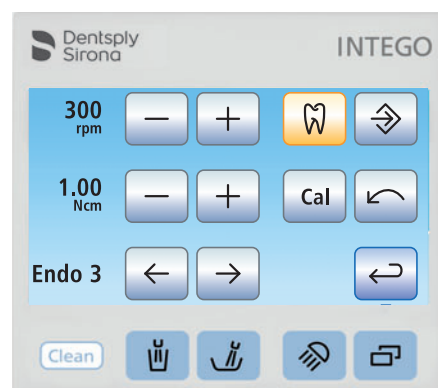

Регулировка крутящего момента

Регулировка скорости и крутящего момента. Мотор останавливается при достижении заданного максимального значения крутящего момента, что гарантирует высокий уровень безопасности и безупречность работы.

Впечатляющий комфорт пациента

Ваши пациенты оценят уровень комфорта: семейство стоматологических установок Intego и Intego Pro обладает эргономичным дизайном и в сочетании с плоским или двухшарнирным подголовником обеспечивает непревзойденный комфорт вашим пациентам. Кресло опускается достаточно низко, чтобы им могли воспользоваться даже дети и пациенты невысокого роста. И несомненно, комфорт при лечении дает пациентам ощущение безопасности и повышает их лояльность к вашей клинике в будущем.

Двухшарнирный подголовник

Быстро регулируется для разных ситуаций, возникающих при лечении, а также под пациентов с различным телосложением.

Обивка «Премиум» и мягкая обивка

Высококачественная обивка обеспечивает комфорт даже при длительном лечении.

НОВИНКА: ErgoMotion

Наклон спинки соответствует движениям позвоночника пациента, что предотвращает эффекты растяжения и сжатия.

Подлокотники

Ваши пациенты могут удобно облокотиться.





НОВИНКА: ErgoMotion – уникальная функция для семейства Intego

Преимущества ErgoMotion

- Улучшенное позиционирование для лечения верхней или нижней челюсти.
- Пациент во время лечения не напрягает голову и шею.
- Позвоночник пациента не растягивается и не сжимается.
- Повторная настройка подголовника не требуется.

Система подъема кресла

Уникальный подъемный механизм кресла плавно перемещает пациентов в нужное положение.

Опора для ног Vario

Поставляется в комплекте с обивкой «Премиум». Может быть легко удлинена, что обеспечивает удобство даже для очень высоких пациентов.

Гигиена, на которую МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Стоматологи всего мира предъявляют высокие требования к безопасности своих пациентов и коллектива. Концепция гигиены Intego и Intego Pro разработана для легкого и быстрого выполнения всех гигиенических требований. Конструкция модуля ассистента и гидроблока позволяет проводить все профилактические процедуры легко и просто.

Intego

Гидроблок и модуль ассистента «Компакт» могут быть адаптированы к большинству требований благодаря свободному выбору системы аспирации и гигиеническим опциям.



Плевательница

Съемная, поворотная, легко моющаяся, с простым доступом.

Функция промывки

Автоматическая очистка всех шлангов на модулях врача и ассистента.

Системы аспирации

Совместимы со всеми стандартными системами влажной и сухой аспирации, включая отделитель амальгамы.



Бутылка с чистой водой

Для дозированной подачи воды. Может быть наполнена раствором Dentosept P для постоянной дезинфекции и ручной санации.



Автоматическая очистка аспирационных шлангов

Адаптеры для автоматической очистки слюноотсоса и пылесоса.



Гладкие поверхности

Гладкие поверхности без зазоров для максимального контроля загрязнения и очистки установки в кратчайшие сроки.

Intego Pro

Разработка гидроблока и модуля ассистента «Комфорт» была основана на всеобъемлющей концепции гигиены. Вы сможете легко и быстро следовать самым высоким стандартам гигиены.

Плевательница

Съемная, поворотная, изготовленная из высококачественного стекла.

Функция промывки и автопромывки

Быстрая или интенсивная (необходимы адаптеры) очистка шлангов для инструментов.

Системы аспирации

Совместимы со всеми стандартными системами влажной и сухой аспирации, включая отделитель амальгамы.



Встроенная система дезинфекции
Функция автоматической санации для регулярной интенсивной дезинфекции раствором Dentosept P. Может использоваться как система автономной подачи воды.



Встроенные адаптеры для санитарной обработки
Для автоматической промывки и санации водных каналов.



Химическая очистка аспирационных шлангов
Емкость с чистящим средством для химической очистки аспирационных каналов.

Надежные инвестиции в будущее

В хорошо организованной клинике правильно подобранные опции для стоматологической установки добавляют комфорта. Поэтому для оптимизации рабочего процесса вы можете подобрать установку из семейства Intego и Intego Pro под ваши требования. Но для нас понятие «надежные инвестиции» значит еще больше – вы можете оснастить свою установку Intego или Intego Pro опциями и интерфейсами, которые позволят в будущем быстро и легко интегрировать новые функции.

Многообразие моделей

Выбор из двух подголовников

Плоский подголовник быстро и эффективно регулируется. В качестве опции можно выбрать легко позиционируемый двухшарнирный подголовник, обеспечивающий оптимальную видимость даже для труднодоступных мест.



Плоский подголовник



Двухшарнирный подголовник

Два операционных светильника – всегда оптимальное освещение

Два варианта светодиодного светильника для оптимального освещения рабочего поля. Операционный светильник премиум-класса LEDview Plus с полихромными светодиодами и совершенными техническими данными обеспечивает безупречную естественность освещения.



LEDlight



LEDview Plus

Модуль ассистента: «Компакт» или «Комфорт»

Оба варианта модуля ассистента занимают очень мало места и гарантируют максимум свободы движения. С моделью «Комфорт» вы можете комфортно работать даже без ассистента.



Модуль ассистента «Компакт»



Модуль ассистента «Комфорт»

Ультрасовременное оснащение

Камера SiroCam F/AF/AF+ с автофокусировкой сочетает в себе потрясающее качество снимков и простоту управления.



| | SiroCam F | SiroCam AF | SiroCam AF+ |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Фокусировка | Фиксированная | Автоматическая | Автоматическая |
| Формат 16:10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разрешение матрицы, мП | 0,42 | 0,65 | 1,00 |
| Рабочая область, мм | ✓ 5–20 | ✓ 2–130 | ✓ 2–130 |
| Видеоразрешение | 824 × 514 | 824 × 514 | 824 × 514 |
| Фоторазрешение | 824 × 514 | 1024 × 640 | 1276 × 796 |

Надежные инвестиции в будущее

Интерфейсы: настройка для будущих функций

Сетевой интерфейс в кресле пациента и USB-порт в модуле врача или ассистента позволяют интегрировать новейшие функции и подключать установки в сеть клиники, при этом поиск и устранение неисправностей станет намного проще.



Интегрированный USB-интерфейс

Монитор Sivision 22"

При помощи этого монитора вы сможете комментировать изображения полости рта и рентгеновские снимки пациентам, работать с ПО, планировать лечение, просматривать видео и презентации непосредственно на стоматологической установке.



Монитор Sivision 22"

Качество, на которое МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Мы не просто стремимся радовать наших клиентов, мы хотим произвести на них впечатление. Именно поэтому качество, производительность и высокий уровень сервиса являются для нас ключевыми факторами. Стоматологические установки компании Dentsply Sirona сочетают в себе высокое качество и инновации, ощутимо повышающие комфорт и оптимизацию рабочего процесса.

Надежность и долговечность



Точные и продуманные тесты качества и проверенные материалы делают Intego и Intego Pro надежными стоматологическими установками с большим сроком службы.

Высокое качество



Стоматологические установки Intego и Intego Pro сразу же демонстрируют наше внимание к деталям. Используемые материалы – прочные, гибкие пластмассы, твердая сталь и алюминиевые компоненты изнутри, высококачественное стекло и обивка – все отвечает требованиям качества для продуктов премиум-класса.

Высокие стандарты



Dentsply Sirona – технологический лидер с более чем 130-летней историей инноваций. Наши инженеры отдела исследований и разработок уделяют пристальное внимание не только инновациям, но и качеству.



Дизайн будущего

В инновационном центре Dentsply Sirona специалисты предвидят будущие тренды, поэтому разрабатывают продукцию в соответствии с технологическими требованиями будущего.



Индивидуальная конфигурация

Вы можете подобрать конфигурацию стоматологических установок Intego и Intego Pro под свои нужды и получить индивидуальный уровень комфорта.

Intego

Базовая комплектация

Кресло пациента

- Обивка «Премиум»
- Плоский подголовник
- Пневматическая педаль ножного управления

Модуль врача

- 5 позиций для инструментов
- Пользовательский интерфейс EasyPad
- Комплект для 2 приводов бора

Модуль ассистента

- Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке
- 4 позиции для инструментов
- Слюноотсос и пылесос

Гидроблок

- Вариант «Компакт»
- Стандартная влажная аспирация
- Возможность автономной подачи воды (бутылка)
- Ручная поворотная плевательница

Версия

TS с нижней подачей инструментов



- Высота модуля врача может регулироваться и удерживаться пневматическим тормозом
- Эргономичный дизайн с гибко позиционируемым модулем врача и поворотным поддоном
- Достаточное пространство для расположения инструментов на модуле врача и поддоне

CS с верхней подачей инструментов



- Идеально подходит для любого вида лечения независимо от того, работаете вы с ассистентом или один
- Оптимальная амплитуда движения инструментов – до 90 см
- Высота модуля врача может регулироваться и удерживаться пневматическим тормозом

Intego Pro

Базовая комплектация

Кресло пациента

- Обивка «Премиум»
- Плоский подголовник
- Пневматическая педаль ножного управления
- Педаль перекрестного действия

Модуль врача

- 5 позиций для инструментов
- Пользовательский интерфейс EasyPad
- 2 привода бора
- Подсветка для инструментов
- Интеграция до 2 электромоторов и скейлера

Модуль ассистента

- Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота
- 4 позиции для инструментов
- Слюноотсос и пылесос
- Подсветка для пюпитера Sprayvit E

Гидроблок

- Вариант «Комфорт»
- Возможность подключения автоматической системы дезинфекции
- Переходники для промывки
- Ручная поворотная плевательница
- Влажная аспирация с клапаном выбора места
- Переходники для очистки аспир. шлангов
- Нагреватель воды

Версия

TS с нижней подачей инструментов



- Высота модуля врача может регулироваться и удерживаться пневматическим тормозом
- Эргономичный дизайн с гибко позиционируемым модулем врача и поворотным поддоном
- Достаточное пространство для расположения инструментов на модуле врача и поддоне

CS с верхней подачей инструментов



- Идеально подходит для любого вида лечения независимо от того, работаете вы с ассистентом или один
- Оптимальная амплитуда движения инструментов – до 90 см
- Высота модуля врача может регулироваться и удерживаться пневматическим тормозом

Пользовательские пакеты



Start

- 3-канальный пюстер «вода-воздух»
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 2 турбинных шланга
- Светильник LEDlight*



Innovation

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Скейлер Sirosonic L
- Светильник LEDview Plus



Ergo

- Система ErgoMotion
- Система подъема кресла (до 185 кг)
- 2 подлокотника
- Двухшарнирный подголовник



Advance

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Светильник LEDlight*



Touch Plus

- Электрическая педаль C+
- Микромотор BL ISO E
- Подсветка для инструментов на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- Интерфейс EasyTouch
- Светильник LEDview Plus



Endo Pro**

- Регулировка крутящего момента
- Апекслокатор
- Угловой наконечник Endo 6:1
- Регулировка скорости e-Control

Пакеты опций



Sivision Ready

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс



Sivision Start

- **с монитором/без монитора**
- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс
- Камера SiroCam F (SiroCam AF/AF+ за дополнительную плату)
- Держатель монитора на стойке светильника
- Опция: монитор 22"

Пользовательские пакеты



Start Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Светильник LEDlight*



Innovation Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 3-й привод бора
- 1 турбинный шланг
- 2 микромотора BL ISO E
- Скейлер Sirosonic L
- Интерфейс EasyTouch
- Пюстер Sprayvit E на модуле ассистента
- Светильник LEDview Plus



Advance Pro

- Электрическая педаль C+
- Пюстер Sprayvit E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Скейлер Sirosonic L
- Интерфейс EasyTouch
- Светильник LEDview Plus



Endo Pro**

- Регулировка крутящего момента
- Апекслокатор
- Угловой наконечник Endo 6:1
- Регулировка скорости e-Control

Пакеты опций



Sivision Ready

- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс



Sivision Start

- **с монитором/без монитора**
- USB-интерфейс на модуле врача или ассистента
- Сетевой интерфейс
- Камера SiroCam F (SiroCam AF/AF+ за дополнительную плату)
- Держатель монитора на стойке светильника
- Опция: монитор 22"

* Светильник LEDview Plus за дополнительную плату.

** Только с интерфейсом EasyTouch.

Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, входящее в базовую комплектацию

| Кресло пациента | Intego | Intego Pro |
|--|--------|------------|
| Функция памяти 4 положений кресла | ■ | ■ |
| Центральная распределительная коробка | ■ | ■ |
| Подъемная система кресла 140 кг | ■ | — |
| Подъемная система кресла 185 кг | — | ■ |
| Плоский подголовник | ■ | ■ |
| Двухшарнирный подголовник | □ Er | □ |
| Обивка «Премиум» | ■ | ■ |
| Комфортная обивка | □ | □ |
| ErgoMotion | □ Er | □ |
| Ножная педаль перекрестного действия | □ | ■ |
| Подушка для детей и пациентов небольшого роста | □ | □ |
| Правый подлокотник | □ Er | □ |
| Левый подлокотник | □ Er | □ |
| Разъемы клапанов для подкл. внешн. устройств | □ | □ |
| Набор для снижения давления | □ | □ |
| Набор для установки крышки | □ | □ |
| Отдельная распределительная коробка | □ | □ |
| Монтажная плита | □ | □ |

| Модуль врача | Intego | Intego Pro |
|--|----------------|------------|
| Регулируемый по высоте кронштейн с пневматическим тормозом | ■ | ■ |
| 5 позиций инструментов | ■ | ■ |
| Дополнительный держатель для камеры (TS) | — | □ |
| Комплект 2 приводов бора (без оптоволокну) | ■ | ■ |
| Пневматическая педаль ножного управления | ■ | ■ |
| Электрическая педаль ножного управления C+ | □ A, I, T | □ S, A, I |
| Интерфейс EasyPad (2 пользователя) | ■ | ■ |
| Интерфейс EasyTouch (4 пользователя) | □ T | □ A, I |
| Пустер Sprayvit E с подсветкой | □ A, I | □ S, A, I |
| Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева) | □ A, I | □ S, A, I |
| 3-канальный пустер «вода-воздух» | □ S | — |
| Турбинный шланг с подсветкой | □ 2xS, A, I, T | □ S, A, I |
| Турбинный шланг Borden | □ | — |
| 1-й микромотор BL ISO E со шлангом | □ A, I, T | □ S, A, I |
| 2-й микромотор BL ISO E со шлангом | □ | □ I |
| Ультразвуковой скейлер Sirosonic L | □ I | □ A, I |
| 3-й привод бора | □ | □ I |
| Полимеризационная лампа Satelec Mini LED | — | □ |
| Подсветка для турбины и Sprayvit E | □ S, A, I, T | ■ |
| Функция контроля крутящего момента | □ E | □ E |
| eControl: диапазон скорости 100–40000 об/мин | □ E | □ E |
| Апекслокатор | □ E | □ E |
| Угловой наконечник ENDO 6:1 | □ E | □ E |
| Негатоскоп (для панорамных снимков) | □ | □ |
| Функции промывки и ручной санации | □ | ■ |
| Силиконовый коврик для модуля врача (TS) | □ | □ |
| Держатель стандартного поддона (CS) | □ | □ |
| Держатель 2 стандартных поддонов (TS/CS) | □ | □ |
| Силиконовый коврик для модуля врача (CS) | □ | □ |
| Съемные силиконовые чехлы для ручек | □ | □ |

■ Входит в базовую комплектацию.
 □ Опция.
 — Отсутствует/неприменимо.
 SiR Пакет Sivation Ready.
 SiS Пакет Sivation Start.
 SiS* Пакет Sivation Start с монитором.

S Пакет Start.
 A Пакет Advance.
 I Пакет Innovation.
 E Пакет Endo Pro.
 Er Пакет Ergo.
 T Пакет Touch Plus.

| Модуль ассистента | Intego | Intego Pro |
|---|--------|------------|
| Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке | ■ | ■ |
| Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота | □ | □ |
| 4 позиции для инструментов | ■ | ■ |
| Слюноотсос и пылесос | ■ | ■ |
| Пустер Sprayvit E с подсветкой | □ | □ I |
| Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева) | □ | □ I |
| 3-канальный пустер «вода-воздух» | □ | — |
| 2-й пылесос | □ | □ |
| Полимеризационная лампа Satelec Mini LED | □ | □ |
| Панель управления | □ | □ |
| Подсветка для Sprayvit E | □ | ■ |
| Силиконовый коврик для варианта «Комфорт» | □ | □ |

| Гидроблок | Intego | Intego Pro |
|---|--------|------------|
| Интегрированная система дезинфекции | — | ■ |
| С подключением бутылки для чистой воды | ■ | — |
| Ручная поворотная плевательница | ■ | ■ |
| Белая чаша плевательницы | — | ■ |
| Стеклопанельная чаша плевательницы | — | □ |
| Гидроблок без плевательницы | □ | □ |
| Стандартная влажная аспирация | ■ | — |
| Автоматическая влажная аспирация | □ | — |
| Клапан выбора места | □ | ■ |
| Клапан плевательницы для влажной аспирации | □ | □ |
| Автоматический отделитель | □ | □ |
| Отделитель амальгамы | □ | □ |
| Бутылка для чистой воды без переключателя | □ | — |
| Бутылка для чистой воды с переключателем | □ | — |
| Система постоянной дезинфекции с функцией длительной стерилизации и санации | — | □ |
| Нагреватель воды | □ | ■ |
| Система промывки аспирационных шлангов | □ | ■ |
| Очистка аспирационных шлангов с использованием химических средств | — | □ |

| Операционный светильник | Intego | Intego Pro |
|---|--------|------------|
| LEDlight | □ S, A | □ |
| LEDview Plus | □ I, T | □ |
| LEDview Plus с креплением на потолке | □ | □ |
| LEDview Plus/Heliident Plus с креплением на потолке | □ | □ |
| Heliident Plus с креплением на установке | □ | □ |

| Система коммуникации с пациентом | Intego | Intego Pro |
|---|------------|------------|
| USB-интерфейс на модуле врача/ассистента | □ SiR, SiS | □ SiR, SiS |
| SiroCam F | □ SiS | □ SiS |
| SiroCam AF | □ | □ |
| SiroCam AF+ | □ | □ |
| Крепление монитора на стойке светильника | □ SiS | □ SiS |
| Монитор 22" с интегрирован. блоком питания* | □ SiS* | □ SiS* |
| Сетевой интерфейс | □ SiR, SiS | □ SiR, SiS |

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.



Рабочий стул Hugo



Рабочий стул Carl

Рабочий стул Paul
с кольцевым упором для ногДополнительный большой
поддон (модуль врача CS)Дополнительный поворотный
поддон (модуль врача TS)

Двухшарнирный подголовник

Полимеризационная лампа
Satelec Mini LEDНегатоскоп
для панорамных снимковДополнительный держатель
для камеры (модуль врача TS)

Модуль ассистента «Комфорт»

Электрическая педаль
ножного управления C+

Плоский подголовник

Разъемы для подключения
внешних устройствHeliodent Plus с креплением
на установке

Монитор 22"

Intego и Intego Pro
без плевательницы

Светильник LEDlight



Светильник LEDview Plus



Камера SiroCam AF



Камера SiroCam AF+

Dentsply Sirona

115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 10-04

Телефон +7 (495) 725-10-87

Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru

Процедурные решения

Профилактика
Реставрация
Ортодонтия
Эндодонтия
Имплантология
Протезирование

Технологические платформы

CAD/CAM
Рентгеновские системы
Стоматологические установки
Инструменты