



Наркозный аппарат WATO EX-35

Непревзойденная производительность

С 2006 года компанией Mindray было успешно установлено более 20 000 наркозных аппаратов у довольных покупателей из различных стран мира. Компания Mindray очень гордится тем, что каждые несколько секунд где-то в мире клиницист включает наркозный аппарат Mindray и работает с ним с полной уверенностью и удовлетворением. На протяжении последних десяти лет компания Mindray осуществляет тесное сотрудничество со специалистами из различных странах мира для определения и понимания ежедневно возникающих клинических задач и проблем, с целью создавать новые интуитивно понятные решения для их преодоления. И теперь компания Mindray с радостью представляет новый, улучшенный WATO EX-35 с усовершенствованными характеристиками, функциями и абсолютно новым дизайном.



WATO EX-35

Непревзойденная производительность



Новая система управления с сенсорным экраном

Устройство оснащено 10,4-дюймовым сенсорным экраном с функцией быстрого доступа к настройкам параметров и новым меню. Новый пользовательский интерфейс WATO EX-35 позволяет производить настройки режимов вентиляции и параметров монитора легче, чем на аналогичных устройствах. Новая сенсорная система интеллектуальной сигнализации в реальном времени предоставляет подробную информацию для быстрого и четкого оповещения клиницистов о неблагоприятных ситуациях, требующих срочного вмешательства и разрешения.

Улучшенная производительность

Созданный на основе самых современных технологий, аппарат WATO EX-35 оснащен большим набором функций и возможностей, обеспечивающих безопасное и эффективное выполнение всех анестезиологических процедур. К улучшенным функциям относятся, в том числе:
Встроенный, не требующий настройки модуль газовых анестетиков (автоматическая идентификация 5 анестетиков и N₂O)
Встроенный многорежимный аппарат ИВЛ, обеспечивающий управляемые и поддерживаемые режимы искусственной вентиляции легких.
Новая уникальная функция автоматического переключателя приводного газа Mindray, гарантирующая непрерывную искусственную вентиляцию легких...

Больше удобство эксплуатации

Разработан с учетом всех пользовательских потребностей. Новый EX-35 предназначен для того, чтобы облегчить вам жизнь. Многофункциональная эргономичная наркозная система легко устанавливается и не вызывает напряжения или усталости в процессе длительной эксплуатации.



Новая система управления с сенсорным экраном

Сенсорный экран, упрощенная настройка

WATO EX-35 оснащен 10,4-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения, на котором одновременно отображается до трех кривых (EtCO₂, давление, поток и объем), спирометрическая петля и полный газовый мониторинг, обеспечивая прямой доступ к настройкам всех параметров. Новая табличная структура меню с быстродействующим сенсорным управлением впервые в мире применена в устройствах данного сегмента рынка.

Сенсорная система интеллектуальной сигнализации

Новая система интеллектуальной сигнализации предоставляет подробную информацию в реальном времени для быстрого и четкого оповещения клиницистов о неблагоприятных ситуациях и способствует их скорейшему разрешению.

Универсальный журнал тревог включает настраиваемый пользователем журнал, в котором содержится следующая информация:

- Сведения о физиологической тревоге с отображением моментального снимка параметра.
- Сведения о технических тревогах, для которых используются диагностические программные средства, сообщающие о возможных причинах тревог и помогающие найти и устранить неисправность в экстренных ситуациях.



Больше удобства в эксплуатации

Благодаря удобному расположению ручек и безотказной работе колес, WATO EX-35 легко и без усилий перемещается в рабочем пространстве.

Большая, легкоочищаемая рабочая поверхность обеспечивает достаточное пространство для ведения записей, размещения лекарств и оборудования для интубации, а эргономичная подставка для ног создает пользователю полный комфорт даже в процессе самой длительной работы.





Улучшенная производительность

Инновационный мониторинг газов P-n-P

Благодаря не требующему настройки улучшенному модулю CO2 с одним разъемом или модулю для анестетиков с двумя разъемами, выполняется подробный визуальный анализ по дыхательным циклам: FiO2, EtO2, CO2, N2O и автоопределение 5 анестетиков. Более того, модули можно подключать к различным мониторам и наркозным аппаратам Mindray с аналогичными функциями, улучшая конфигурацию устройств и универсальность применения в различных условиях.


Автоматический переключатель приводного газа

Принципы безопасности лежат в основе всех устройств Mindray, и WATO EX-35 не исключение. Совершенно новая функция автоматического переключателя приводного газа обеспечивает пациенту непрерывную механическую вентиляцию даже в случае отказа основного источника приводного газа.



Высокопроизводительный аппарат ИВЛ

Новый WATO EX-35 поддерживает полный набор управляющих и поддерживающих режимов искусственной вентиляции легких. Благодаря компенсации дыхательного объема, начиная от уровня Tve 20 мл, новый WATO EX-35 подходит для всех категорий пациентов, как для новорожденных, так и для взрослых.

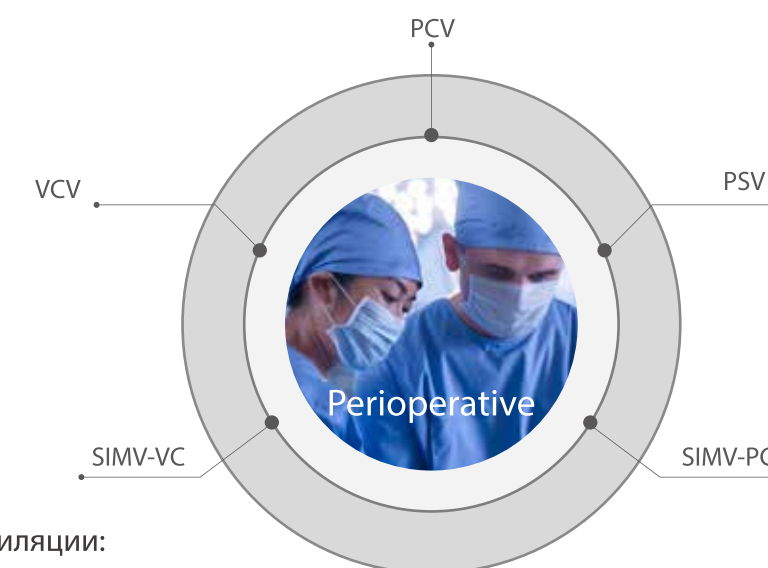

Доступные режимы вентиляции:

- Вентиляция с регулируемым объемом (VCV)
- Вентиляция с регулируемым давлением (PCV)
- Вентиляция с поддержкой давлением + вентиляция при возникновении апноэ (PSV + вентиляция при возникновении апноэ)
- Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – VC (SIMV -VC)
- Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – PC (SIMV -PC)



Работайте с лучшими, всё остальное компромисс!

8-800-775-36-85 | info@cmtrade.ru